


PAJUNK®

Fijador de Catéter

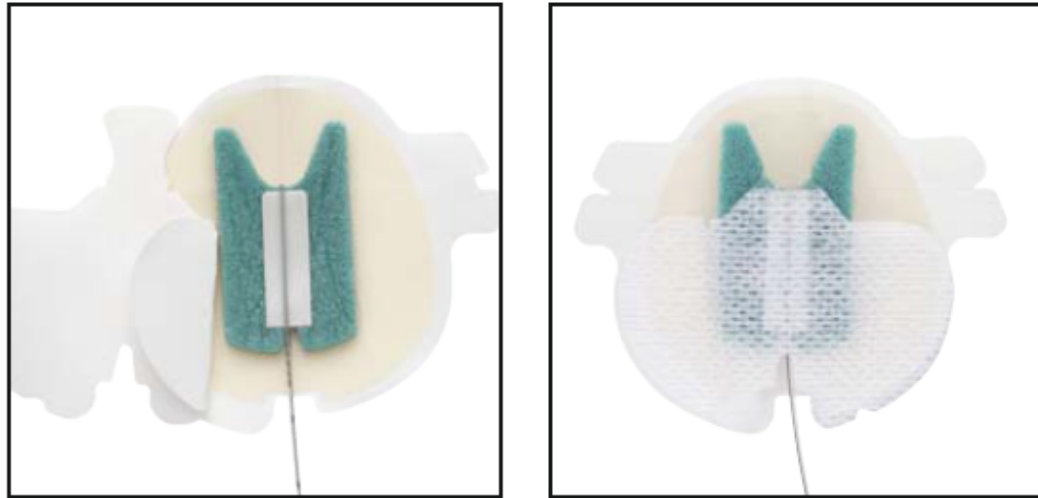


FixoCath

ITEM No. 001151-37Z

El FixoCath es una combinación de apósito para heridas y fijación al mismo tiempo, y se aplica directamente en el punto de salida del catéter.

Se puede excluir el plegado o doblamiento del catéter en la mayor medida posible. Aquí también se garantiza un máximo de movilidad para el paciente.

Fijación opcional de E-Cath con FixoCath

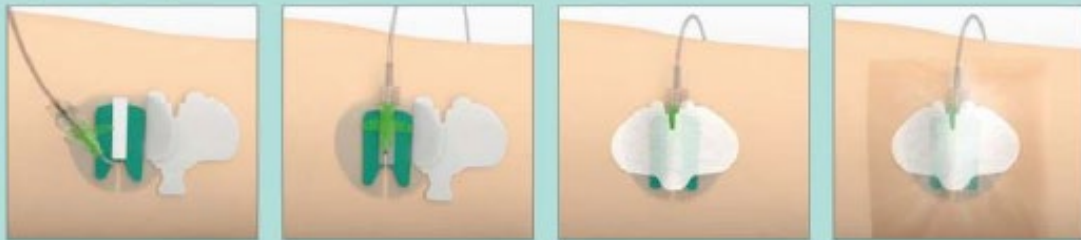

1. La tira adhesiva de FixoCath se retira y se aplica al paciente.

2. El catéter se coloca en el centro de FixoCath.

3. Se retira la tira adhesiva del parche superpuesto y se fija el catéter.

4. FixoCath se puede cubrir adicionalmente con un parche translúcido