

PAJUNK®

UniPlex NanoLine

Cánula de punción e inyección para el bloqueo periférico continuo de los nervios.

Mediante estimulación eléctrica es posible identificar en forma precisa y ergonómica el área de aplicación.



Plexus

Mayor precisión

Se requiere menos fuerza de punción

Con NanoLine, PAJUNK presenta una novedad mundial en el ámbito del recubrimiento de cánulas.

Solo utilizando la nueva tecnología de capa fina, el revestimiento aislante se reduce al mínimo, proporcionando la misma calidad de aislamiento.

Extensas pruebas realizadas por destacados anestesiólogos demostraron que como resultado del recubrimiento de polímero, la punción se puede realizar de forma más sutil y la estimulación nerviosa se ha demostrado que es más precisa.

El material de recubrimiento de NanoLine fue probado desde hace varios años y su compatibilidad ha sido comprobada dentro del ámbito de la biocompatibilidad y pruebas de sensibilidad.



Cánula UniPlex NanoLine SPROTTE



La punta conductora no aislada muestra una transición muy suave hacia el revestimiento.



Cánula UniPlex NanoLine con punta SPROTTE



Cánula UniPlex NanoLine con punta facetada

El revolucionario recubrimiento NanoLine

El nuevo proceso de recubrimiento NanoLine PAJUNK® permite a PAJUNK® lograr las mismas características sobresalientes de aislamiento en comparación a los métodos convencionales. La principal ventaja del método es el hecho que el nuevo proceso de recubrimiento permite aislar perfectamente la aguja con una capa muy delgada que prácticamente no cambia el diámetro exterior de la cánula o afecta su uniformidad. La uniformidad perfecta y exacta de la punta de la cánula NanoLine reduce la fuerza de punción y permite una estimulación muy precisa.

Ideal Revestimiento Interno


El recubrimiento NanoLine permite nivelar superficies desiguales y un menor flujo de anestesia en el lumen interior.

Marca registrada - Brillo Dorado

El recubrimiento NanoLine es transparente y tan delgado que solo puede ser percibido por el color dorado claro. El punto de contacto para la estimulación nerviosa en la punta de la cánula permanece sin aislamiento.



UniPlex NanoLine con punta facetada

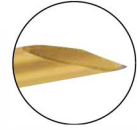

La punta conductora con su transición muy suave hacia el recubrimiento.

Marcaje de penetración incluido

Para una orientación exacta, todas las cánulas UniPlex tienen ahora una marca de penetración claramente visible en centímetros.



NUEVO:

Visualización perfecta bajo vigilancia ultrasónica.

Otra ventaja del innovador NanoLine es que el recubrimiento tiene efecto teniendo en cuenta la creciente frecuencia de colocación de las cánulas bajo supervisión ultrasónica. Debido a que los bordes recubiertos se reflejan tan bien, la abertura lateral puede estar bien identificada. PAJUNK® ha utilizado este hecho para proporcionar una localización aún más precisa, y ha reubicado la abertura lateral hacia adelante incluso más cerca de la punta de la cánula. Con el efecto secundario positivo de una punción aún más exacta.



Colocación de la abertura lateral 30% más cerca de la punta.

**Cánula UniPlex NanoLine completa:
De un Vistazo**

Cánula UniPlex NanoLine					
Producto	Medida	Longitud (mm)	Inch	Item no.	PU
UniPlex NanoLine punta facetada					
UP 3/50	22 G	50	2	001156-74	10
UP 3/100	22 G	100	4	001156-84	10
UP 3/100	21 G	100	4	001156-77	10
UP 3/150	20 G	150	6	001156-76	10

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



**DROGUERIA
SHARCOM S.R.L.**

Av. General Garzón 1192, Jesús María - Lima - Peru
Telf.: 424-5852 - Móvil: 998 016 861
E-mail: info@sharcom.net | ventas@sharcom.net
www.sharcom.net